


Консоль кислородная настенная

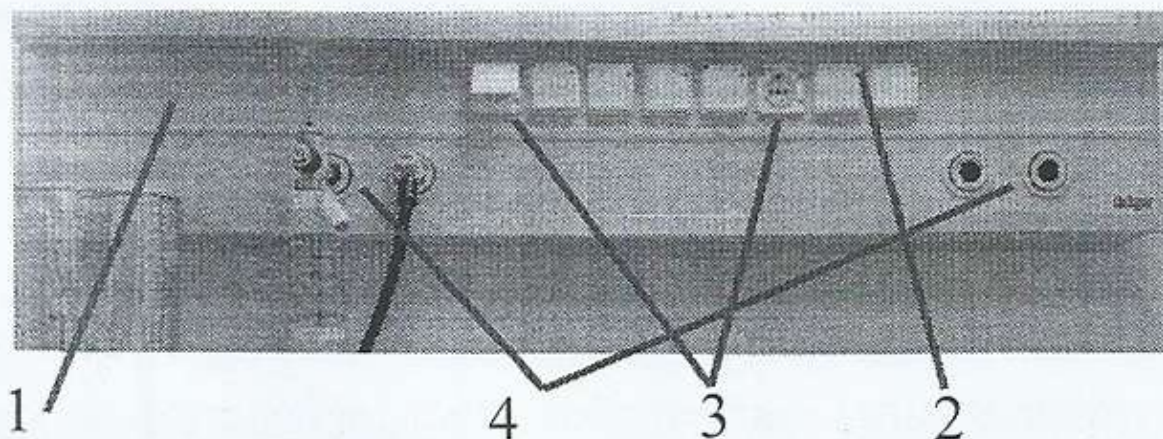

- 1-медицинская реанимационная консоль;
- 2-светодиодный индикатор электропитания;
- 3-однофазная евророзетка с клеммой заземления;
- 4-газовый клапан для подключения дыхательной аппаратуры (кислород, сжатый воздух)

Работа на оборудовании:

1. Консоль подключена к электропитанию и готова к использованию.
2. Порядок работы с газовым клапаном:
 - установить штекер до щелчка (до упора) замка клапана (с усилием, достаточным для преодоления встречного давления).
3. Отпустить штекер, проверив, что он остается прикрепленной к соединению.
4. Открыть вентиль и обеспечить подачу газа.
5. Для выключения клапана необходимо:
 - перекрыть вентиль
 - нажать до упора кольцо-фиксатор и вынуть штекер

Внимание! Для удобства и безопасности необходимо придерживать штекер руками, утапливая его во внутрь клапана и одновременно нажимать на кольцо-фиксатор, т.к. в процессе выключения возможен выброс штекера давлением газа!



Запрещается:

- не допускать попадание смазочных материалов во внутреннее отверстие клапана и на наконечник штекера;
 - запрещено подключать зарядные устройства;
 - запрещено использовать устройство в случае неправильного функционирования или повреждения систем обеспечения безопасности.
- Если медицинское устройство повреждено или находится в ремонте, нужно отключить питание и прикрепить хорошо заметную табличку с надписью «НЕ РАБОТАЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ».