



Насос инфузионный шприцевой Перфузор компакт плюс

Включение электропитания







1. Подключите аппарат к источнику переменного тока. Загорится индикатор питания от сети - насос в состоянии готовности к пуску.

2. Нажмите кнопку питания аппарата  и удерживайте в течение 1,2 секунд, система начнет самодиагностику. Если на цифровом дисплее не появляется знак ERR, значит, функционирование аппарата в норме.

Установка шприца

1. Наполните шприц нужным раствором, удалите пузырьки воздуха и поместите шприц в держатель

2. Тщательно закрепите цилиндр шприца при помощи фиксатора цилиндра шприца

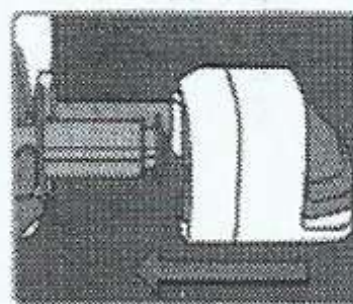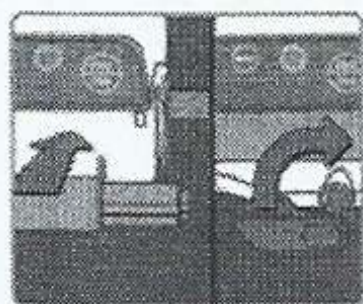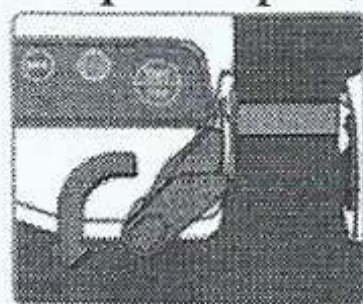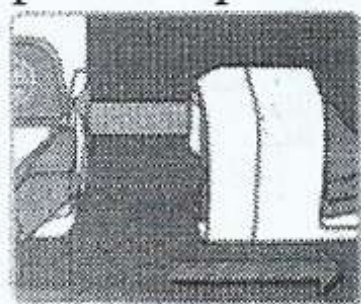

3. Нажав дважды и удержав кнопку  дождитесь появления раствора на кончике иглы.

4. После настройки всех параметров, введите иглу в вену (артерию) пациента и нажмите кнопку . Насос запустил процесс инфузии.